

RadiForce® RX440

Color LCD Monitor

Instructions for Use: ■ Setup Manual

Important: Please read PRECAUTIONS, this Setup Manual and the User's Manual (on the CD-ROM) carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this manual for future reference.

Gebrauchsanweisung: ■ Installationshandbuch

Wichtig: Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, dieses Handbuch zur Einrichtung und das Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Notice d'instruction: ■ Manuel d'installation

Important : Veuillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Manuel d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation (inclus sur le CD-ROM) afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

使用说明书: ■ 设定手册

重要事项: 请仔细阅读预防措施、本设定手册和用户手册（储存在光盘上），以便掌握如何安全、有效地使用本产品。请保留本手册，以备日后参考。

- El Manual de instalación en español se puede descargar del sitio: <http://www.eizoglobal.com>
- Il Manuale di installazione in Italiano è disponibile per il download nel sito Web all'indirizzo: <http://www.eizoglobal.com>
- Installationshandboken på svenska går att ladda ned från vår webbplats: <http://www.eizoglobal.com>
- Μπορείτε να κάνετε λήψη του Εγχειριδίου εγκατάστασης στα Ελληνικά από τον ιστότοπό μας: <http://www.eizoglobal.com>
- Руководство по установке на русском языке доступно для загрузки с нашего сайта по адресу: <http://www.eizoglobal.com>
- 中文的設定操作手冊可以從我們的網站下載: <http://www.eizoglobal.com>
- Instalační příručka v češtině je dostupná ke stažení z našich stránek: <http://www.eizoglobal.com>
- En installationsvejledning på dansk kan hentes fra vores websted: <http://www.eizoglobal.com>
- Asennusopas suomeksi on ladattavissa osoitteesta: <http://www.eizoglobal.com>
- 한국어로 된 설치 설명서를 당사 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다: <http://www.eizoglobal.com>
- De installatiehandleiding in het Nederlands kan worden gedownload van onze site: <http://www.eizoglobal.com>
- Installasjonsveiledning på norsk kan lastes ned fra vårt område: <http://www.eizoglobal.com>
- Podręcznik instalacji w języku polskim można pobrać z naszej witryny internetowej: <http://www.eizoglobal.com>
- O Manual de instalação (em português) está disponível para download no nosso website: <http://www.eizoglobal.com>
- Türkçe Kurulum Kılavuzu sitemizden indirilebilir: <http://www.eizoglobal.com>
- <http://www.eizoglobal.com>: يتوفر دليل الإعداد باللغة العربية للتنزيل من موقعنا



Compatible Resolutions

Kompatible Auflösungen

Résolutions compatibles

兼容的分辨率

The monitor supports the following resolutions.

Der Monitor unterstützt die folgenden Auflösungen.

Ce moniteur prend en charge les résolutions suivantes.

本显示器支持下列分辨率。

√ : Supported

DisplayPort

Resolution	Applicable signal	vertical scan frequency	Dot Clock	Single		PbyP ^{*1}		PinP ^{*1}
				Landscape	Portrait	Landscape	Portrait	Landscape
720×400	VGA TEXT	70 Hz	280 MHz (Max.)	√	√	√	√	√
640×480	VGA	60 Hz		√	√	√	√	√
800×600	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1024×768	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		-	-	√	-	-
1280×1024	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1280×1600	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	√	-	-
1600×1200	VESA	60 Hz		√	√	-	√	√
1600×1280	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	-	√	-
1600×2560	VESA CVT RB	60 Hz		-	√	-	-	-
2560×1600	VESA CVT RB	60 Hz		√	-	-	-	√

DVI-1 / DVI-2

Resolution	Applicable signal	vertical scan frequency	Dot Clock	Single		PbyP ^{*1}		PinP ^{*1}
				Landscape	Portrait	Landscape	Portrait	Landscape
720×400	VGA TEXT	70 Hz	DVI-1 : 280 MHz (Max.) DVI-2 : 165 MHz (Max.)	√	√	√	√	√
640×480	VGA	60 Hz		√	√	√	√	√
800×600	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1024×768	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1200×1600	VESA	60 Hz		-	-	√	-	-
1280×1024	VESA	60 Hz		√	√	√	√	√
1280×1600	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	√	-	-
1600×1200	VESA	60 Hz		√	√	-	√	√ ^{*3}
1600×1280	VESA CVT RB	60 Hz		-	-	-	√	-
1600×2560	VESA CVT RB	60 Hz		-	√ ^{*3}	-	-	-
1600×2560	Single Link	30 Hz		-	√	-	-	-
2560×1600	VESA CVT RB	60 Hz		√ ^{*3}	-	-	-	-
2560×1600 ^{*2}	VESA CVT RB	30 Hz	√	-	-	-	√ ^{*3}	

*1 For details, refer to the User's Manual (on the CD-ROM). The applicable signal for the sub screen (Sub) for "PinP" differs.

*1 Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM). Das geeignete Signal für den Nebens Bildschirm (Neben) für „PinP“ ist unterschiedlich.

*1 Reportez-vous au Manuel d'utilisation (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails. Le signal applicable pour le sous-écran (Sous) pour « PinP » diffère.

*1 详细说明, 请参照 (在CD-ROM上) 用户手册。“PinP”子画面(子)的适用信号不同。

*2 Single Link

*3 Only supported by DVI-1

*3 Nur von DVI-1 unterstützt


*3 Uniquement compatible avec DVI-1

*3 只有DVI-1支持

RadiForce® RX440

Color LCD Monitor



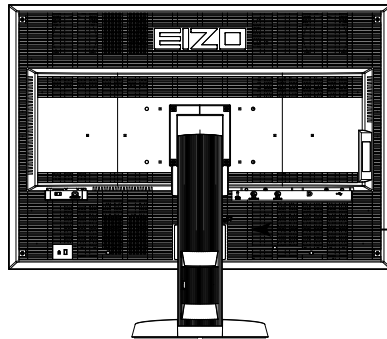





Location of the Caution Statements




WARNING
 RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.
AVERTISSEMENT
 RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
WARNUNG
 GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.
 警告
 触电危険、请勿打开后盖。
 警告
 感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
 L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
 Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
 Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
 设备必须连接到接地的电源插座。
 電源コードのアースは必ず接地してください。

Symbols on the unit

Symbol	This symbol indicates
	Main Power Switch: Press to turn the monitor's main power off.
	Main Power Switch: Press to turn the monitor's main power on.
	Power button: Press to turn the monitor's power on or off.
	Alternating current
	Alerting electrical hazard
	CAUTION: Refer to SAFETY SYMBOLS section in PRECAUTIONS.
	WEEE marking: Product must be disposed of separately; materials may be recycled.
	CE marking: EU conformity mark in accordance with the provisions of Council Directive 93/42/EEC and 2011/65EU.

No part of this manual may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission of EIZO Corporation.


EIZO Corporation is under no obligation to hold any submitted material or information confidential unless prior arrangements are made pursuant to EIZO Corporation's receipt of said information. Although every effort has been made to ensure that this manual provides up-to-date information, please note that EIZO monitor specifications are subject to change without notice.

Package Contents


Check that all the following items are included in the packaging box. If any items are missing or damaged, contact your local EIZO representative.

Note

- Please keep the packaging box and materials for future movement or transport of the monitor.
 - Monitor
 - Power cord
 - Digital signal cable : DisplayPort - DisplayPort (PP300)
 - Digital signal cable : DVI-D - DVI-D (Dual Link) (DD300DL)
 - USB cable : UU300
 - EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 - Setup Manual (this manual)
 - PRECAUTIONS
 - VESA Mounting Screws: M4 × 12: 2 pcs.

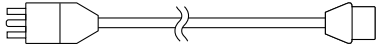

Controls and Functions

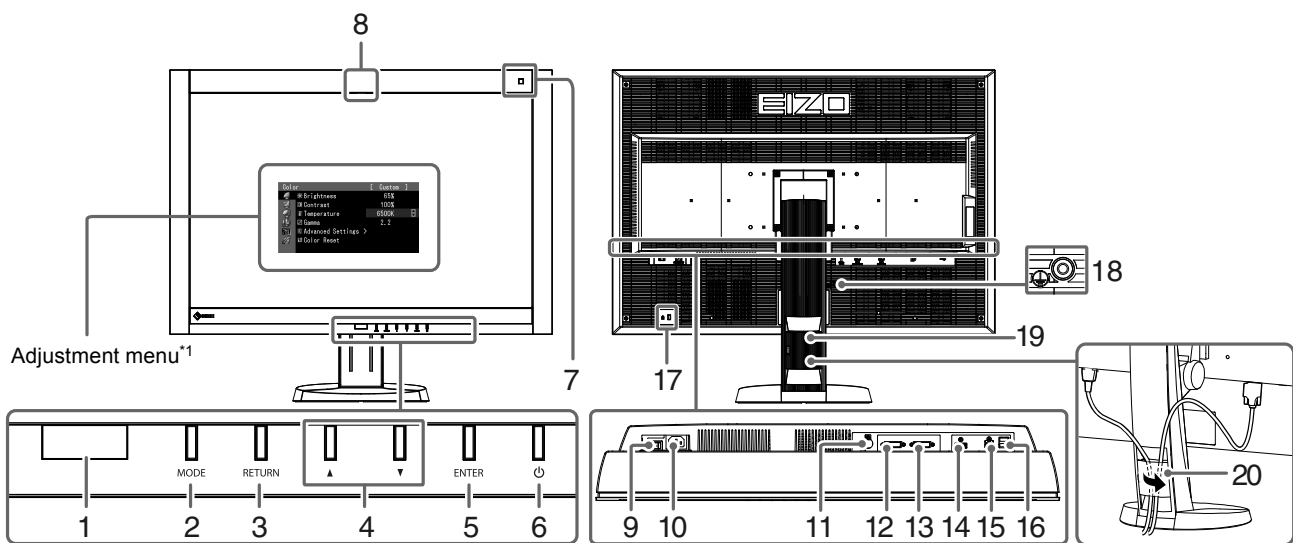

1. Presence Sensor	Detects the movement of a person in front of the monitor.
2. MODE button	Switches the CAL Switch mode.
3. RETURN button	Cancels the setting/adjustment and exits the Adjustment menu.
4. ▲▼ button	Chooses and increases/decreases adjustment settings for advanced adjustment using the Adjustment menu.
5. ENTER button	Displays the Adjustment menu, determines an item on the menu screen, and saves values adjusted.
6. ⏻ button	<ul style="list-style-type: none"> • Turns the power on or off. • Indicates the monitor's operation status. Green: Operating, Orange: Power saving mode, Off: Main power/power off
7. Ambient Light Sensor	Measures the environmental illuminance.
8. Integrated Front Sensor (slide type)	Used for calibration and Grayscale Check.
9. Main power switch	Turns the main power on or off.
10. Power connector	Connects the power cord.
11. PS/2 connector	Used for maintenance. Do not use for other applications. This may cause the monitor to malfunction.
12. Input signal connector	DVI-D connector (DVI-2 : Single Link)
13. Input signal connector	DVI-D connector (DVI-1 : Dual Link)
14. Input signal connector	DisplayPort connector
15. USB upstream port	Connects the USB cable to use the software that needs USB connection, or to use USB Hub function.
16. USB downstream port	Connects a peripheral USB device.
17. Security lock slot	Complies with Kensington's MicroSaver security system.
18. ⚡ mark	Protective earth terminal
19. Stand	Used to adjust the height and angle of the monitor screen.
20. Cable holder	Covers the monitor cables.

*1 For instructions for use, refer to the User's Manual (on the CD-ROM).

Connecting Cables

Attention

- Check that the monitor and the PC are powered off.
- When replacing the current monitor with this monitor, be sure to change the PC settings for resolution and vertical scan frequency to those that are available for this monitor. Refer to the compatible resolution table (back of cover page) before connecting the PC.


Note

- When connecting multiple PCs to this product, or displaying the images from two signals at the same time using one PC, refer to the User's Manual (on the CD-ROM).
- When two signals are displayed at the same time using the "PinP" or "PbyP" functions, the following input signals are displayed on the "Main" and "Sub" screens. For details, refer to the User's Manual (on the CD-ROM).
 - Main: DisplayPort or DVI-1
 - Sub: DVI-2

1. Connect the signal cables to the input signal connectors and PC.

Check the shape of the connectors, and connect the cables.

After connecting the signal cable, tighten the screws of the connectors to secure the coupling.

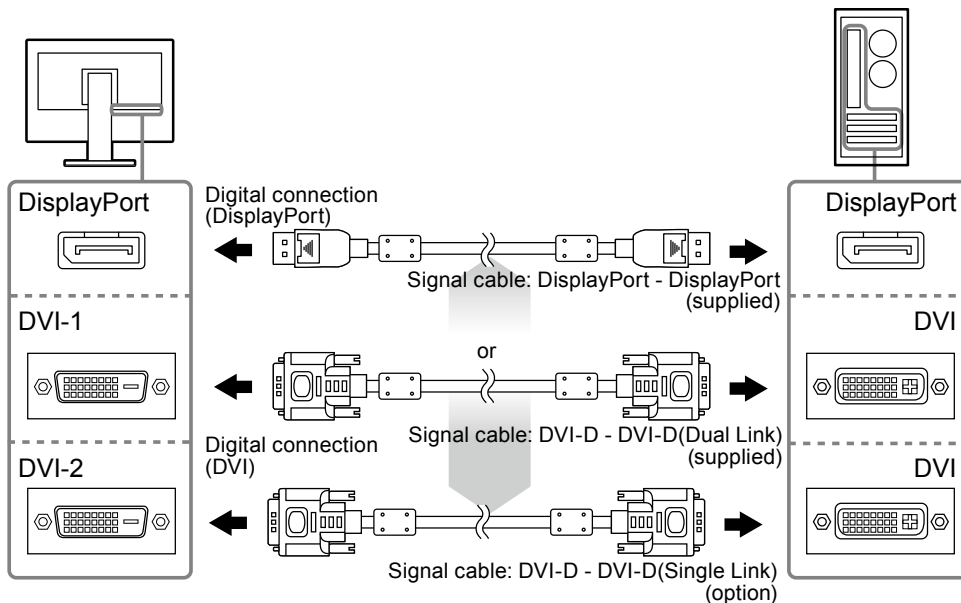

2. Plug the power cord into a power outlet and the power connector on the monitor.

3. Connect the USB cable when using RadiCS LE or ScreenManager Pro for Medical.



4. Press to turn on the monitor.

The monitor's power indicator lights up green.

5. Turn on the PC.

The screen image appears.


If an image does not appear, refer to "No picture" (page 6) for additional advice.

Attention

- Turn off the monitor and PC after using them.
 - For the maximum power saving, it is recommended that the Power button be turned off. Turning off the main power switch or unplugging the power cord completely shuts off power supply to the monitor.
-

Adjusting the Screen Height and Angle


Hold left and right edge of the monitor with both hands, and adjust the screen height, tilt and swivel of the screen to the best condition for working.

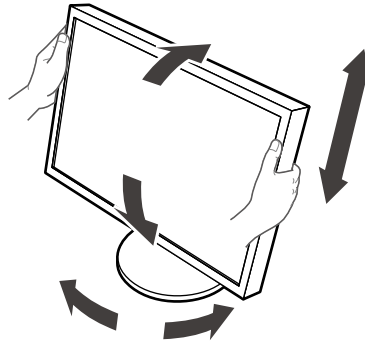


Attention

- Be sure that the cables are correctly connected.
-

Showing Button Guide

Press the front buttons (except  button), the Button Guide appears above the button.

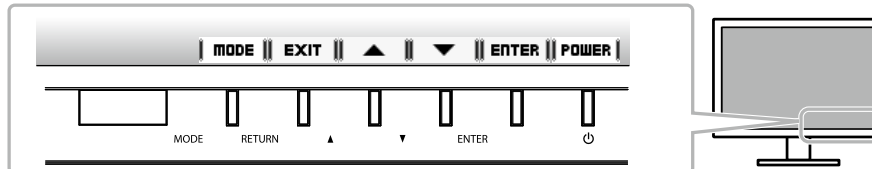

Note

- The Button Guide will continue to appear while the Adjustment menu or mode menu is showing.
 - The Button Guide is displayed differently depending on the selected menu or status.
-


Selecting Display Mode

This function allows easy selection of a desired mode according to monitor application.

√: Calibration is available.

Mode	Purpose	
1-DICOM	Available to display in DICOM mode.	√
2-Custom	Available for the setting according to your preference.	√
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3	Displays the screen adjusted by calibration software.	√
6-Hybrid-γ	Automatically identifies the display area for the monochrome and color images on the same screen, and displays each set status.	-
7-sRGB	Suitable for color matching with sRGB compatible peripherals.	-
8-Text	Suitable for displaying texts for word processing or spreadsheets.	-
9-ALT ^{*1}	Suitable for displaying the color with the brightness and grayscale appropriate for the environmental illumination.	-

*1 The items described above may not be displayed correctly depending on the usage environment. The quality of the monitor cannot be managed using this mode.

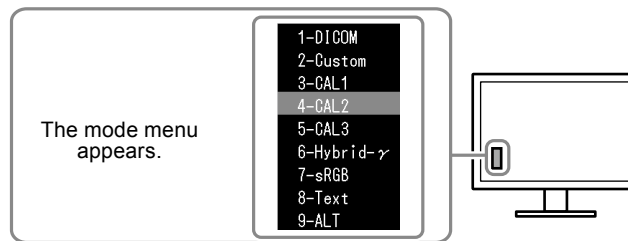


Procedure

1. Press MODE.

The mode menu appears at the bottom left of the screen.

2. The mode among the list is highlighted in turn each time MODE is pressed.

You can switch the mode with ▲ or ▼ while the mode menu is displayed.

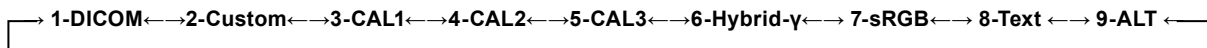

Controlling Monitor Quality

The quality control software “RadiCS LE” (for Windows) is included with this monitor.

To calibrate the monitor and manage the calibration history, install RadiCS LE with reference to the RadiCS LE User's Manual (on the CD-ROM). Use the RadiCS SelfQC function and built-in Integrated Front Sensor to perform periodic calibration and Grayscale Check for the monitor independently. For details, refer to the User's Manual (on the CD-ROM).

Attention


- Connect the monitor to the PC with a USB cable when using RadiCS LE.

Note

- To perform advanced quality control that conforms to medical standards, use the optional monitor quality control software kit “RadiCS UX1”.

No picture


If a problem still remains after applying the suggested remedies, contact your local EIZO representative.

Problem	Possible cause and remedy
<p>1. No picture</p> <ul style="list-style-type: none"> Power indicator does not light. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Power indicator is lighting green. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Power indicator is lighting orange. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Power indicator flashes orange and green. 	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the power cord is connected properly. Turn the main power switch on. Press . Turn off the main power, and then turn it on again a few minutes later. Increase "Brightness", "Contrast", or "Gain" in the Adjustment menu. Turn off the main power, and then turn it on again. Switch the input signal. For details, refer to the User's Manual (on the CD-ROM). Operate the mouse or keyboard. Check whether the PC is turned on. When Presence Sensor is set to "Auto" or "Manual", the monitor may have shifted to the power saving mode. Come near to the monitor. Turn off the main power, and then turn it on again. There is a problem in the device that uses DisplayPort connection. Solve the problem, turn off the monitor, and then turn it on again. Refer to the user's manual of the device that uses DisplayPort connection for details.
<p>2. The message below appears.</p> <ul style="list-style-type: none"> This message appears when no signal is input. Example: <div data-bbox="316 1077 627 1274" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> The message shows that the input signal is out of the specified frequency range. Example: <div data-bbox="316 1391 627 1626" data-label="Image"> </div> <p>fD: Dot Clock fH: Horizontal Scan Frequency fV: Vertical scan frequency</p>	<p>This message appears when the signal is not input correctly even when the monitor functions properly.</p> <ul style="list-style-type: none"> The message shown left may appear, because some PCs do not output the signal soon after power-on. Check whether the PC is turned on. Check whether the signal cable is connected properly. Switch the input signal. For details, refer to the User's Manual (on the CD-ROM). Check whether the PC is configured to meet the resolution and vertical scan frequency requirements of the monitor (see "Compatible Resolutions"). Reboot the PC. Select an appropriate display mode using the graphics board's utility. Refer to the manual of the graphics board for details.

RadiForce® RX440

LCD-Farbmonitor

Stelle der Warnungshinweise

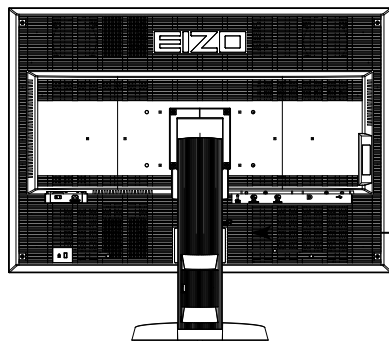



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.









WARNING
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険、请勿打开后盖。

警告
感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung	
	Hauptnetz-Schalter:	Drücken, um das Netzteil des Monitors auszuschalten.
	Hauptnetz-Schalter:	Drücken, um das Netzteil des Monitors einzuschalten.
	Netzschalter:	Drücken, um den Monitor ein- und auszuschalten.
	Wechselstrom	
	Warnung vor elektrischem Schlag	
	ACHTUNG:	Informationen zu den SICHERHEITSSYMBOLEN finden Sie in den VORSICHTSMASSNAHMEN.
	WEEE-Kennzeichnung:	Dieses Produkt muss separat entsorgt werden. Die verwendeten Materialien können unter Umständen wiederverwertet werden.
	CE-Kennzeichnung:	EG-Konformitätskennzeichen gemäß den Auflagen der Richtlinien 93/42/EEC und 2011/65EU des Europäischen Rates.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von EIZO Corporation in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln – elektronisch, mechanisch oder auf andere Weise – reproduziert, in einem Suchsystem gespeichert oder übertragen werden.


EIZO Corporation ist in keiner Weise verpflichtet, zur Verfügung gestelltes Material oder Informationen vertraulich zu behandeln, es sei denn, es wurden mit EIZO Corporation beim Empfang der Informationen entsprechende Abmachungen getroffen. Obwohl größte Sorgfalt aufgewendet wurde, um zu gewährleisten, dass die Informationen in diesem Handbuch dem neuesten Stand entsprechen, ist zu beachten, dass die Spezifikationen der Monitore von EIZO ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Verpackungsinhalt

Prüfen Sie, ob sich alle der folgenden Gegenstände in der Verpackung befinden. Sollte einer der Gegenstände fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an einen lokalen EIZO- Handelsvertreter in Ihrer Nähe.


Hinweis

- Heben Sie die Verpackung sowie die Verpackungsmaterialien für evtl. Transporte des Monitors gut auf.
 - Monitor
 - Netz Kabel
 - USB-Kabel : UU300
 - EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
 - Installationshandbuch (das vorliegende Handbuch)
 - VORSICHTSMASSNAHMEN
 - VESA-Befestigungsschrauben : M4 × 12 : 2 St.

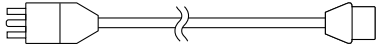

- Digitales Signalkabel : DisplayPort - DisplayPort (PP300)
- Digitales Signalkabel : DVI-D - DVI-D (Dual Link) (DD300DL)

Steuerelemente und Funktionen

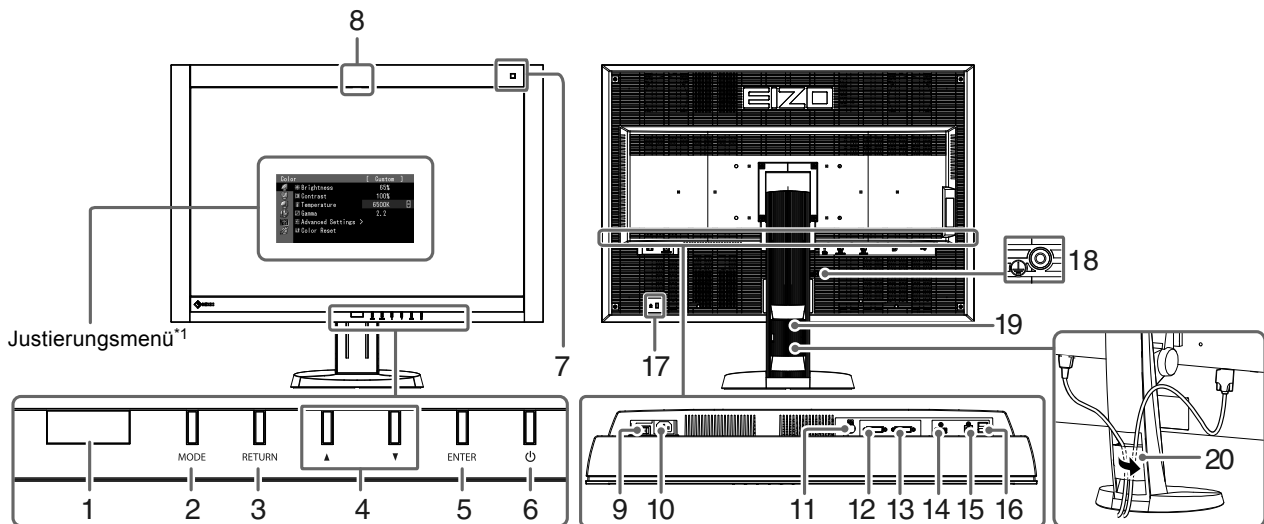

1. Anwesenheitssensor	Erkennt die Bewegung einer Person vor dem Monitor.
2. MODE Taste	Wechselt den CAL Switch-Modus.
3. RETURN Taste	Abbruch der Einstellung/Justierung und Beenden des Justierungsmenüs.
4. ▲▼ Taste	Wählt und erhöht/verringert Justierungseinstellungen für die erweiterte Justierung mithilfe des Justierungsmenüs.
5. ENTER Taste	Zeigt das Justierungsmenü an, wählt ein Element im Menübildschirm und speichert geänderte Werte.
6. ⏻ Taste	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Ein- und Ausschalten. • Zeigt den Betriebsstatus des Monitors an. Grün: In Betrieb, Orange: Energiesparmodus, Aus: Hauptnetz/Netzschalter aus
7. Umgebungslichtsensor	Misst die Umgebungsbeleuchtung.
8. Integrierter Frontsensor (Schiebe-Typ)	Dient für Kalibrierung und Grauskalenprüfung.
9. Hauptnetz-Schalter	Schaltet das Hauptnetz ein oder aus.
10. Netzanschluss	Dient zum Verbinden des Netzkabels.
11. PS/2-Anschluss	Dient zur Wartung. Nicht für andere Anwendungen benutzen. Dies könnte eine Fehlfunktion des Monitors verursachen.
12. Signaleingang	DVI-D-Anschluss (DVI-2 : Single Link)
13. Signaleingang	DVI-D-Anschluss (DVI-1 : Dual Link)
14. Signaleingang	DisplayPort-Anschluss
15. USB-Ausgang	Dient zum Anschließen des USB-Kabels zur Verwendung von Software, die eine USB-Verbindung benötigt, oder zur Verwendung der USB-Hub-Funktion.
16. USB-Eingang	Verbindet ein USB-Peripheriegerät.
17. Öffnung für Diebstahlsicherung	Kompatibel mit dem Kensington MicroSaver-Sicherheitssystem.
18. ⚡-Markierung	Schutzerdungsanschluss
19. Standfuß	Wird zum Justieren der Höhe und des Winkels des Monitorbildschirms verwendet.
20. Kabelabdeckung	Verdeckt die Monitorkabel.

*1 Informationen zur Verwendung entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM).

Kabel anschließen

Beachte

- Stellen Sie sicher, dass Computer und Monitor ausgeschaltet sind.
- Wenn der vorhandene Monitor durch diesen Monitor ersetzt wird, müssen auf jeden Fall die PC-Einstellungen für die Auflösung und die vertikale Abtastfrequenz auf diejenigen umgeändert werden, die für diesen Monitor verfügbar sind. Ziehen Sie vor dem Anschließen des PCs die Tabelle Kompatible Auflösung (Rückseite des Deckblattes) zu Rate.


Hinweis

- Wenn Sie mehrere PCs mit diesem Produkt verbinden oder Bilder von zwei Signalen gleichzeitig mit einem PC anzeigen, lesen Sie im Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM) nach.
- Wenn zwei Signale gleichzeitig mit den Funktionen „PinP“ oder „PbyP“ angezeigt werden, werden die folgenden Eingangssignale in den „Haupt“- und „Neben“-Bildschirmen angezeigt. Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM).
 - Haupt: DisplayPort oder DVI-1
 - Neben: DVI-2

1. Verbinden Sie die Signalkabel mit den Signaleingängen und dem PC.

Prüfen Sie die Form der Anschlüsse, bevor Sie die Kabel verbinden.

Ziehen Sie nach dem Anschließen der Kabel die Schrauben der Anschlüsse an, um die Verbindung zu sichern.

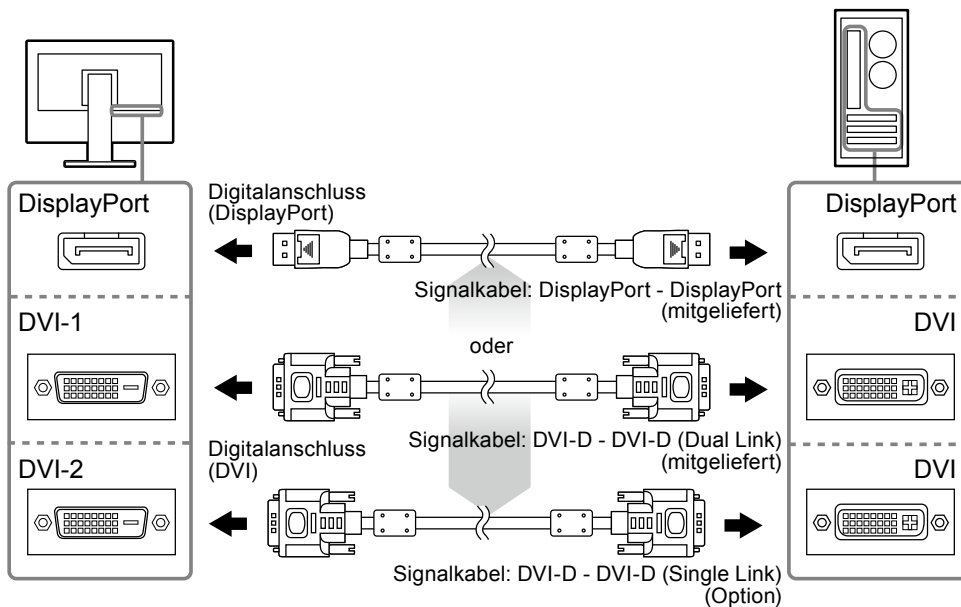

2. Verbinden sie mithilfe des Netzkabels den Netzanschluss des Monitors mit einer Steckdose.

3. Bei Verwendung der Software RadiCS LE oder ScreenManager Pro for Medical schließen Sie das USB-Kabel an.



4. Drücken Sie , um den Monitor einzuschalten.

Die Netzkontroll-LED des Monitors leuchtet auf (grün).

5. Schalten Sie den Computer ein.

Das Bildschirmbild erscheint.


Falls kein Bild erscheint, siehe „Kein Bild“ (Seite 6).

Beachte

- Schalten Sie Computer und Monitor aus, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
 - Um möglichst viel Energiesparen, empfiehlt es sich, auch den Netzschalter auszuschalten. Durch Ausschalten des Hauptnetzschalters oder durch Abtrennen des Netzkabels wird die Stromversorgung des Monitors vollständig unterbrochen.
-

Höhe und Neigung des Bildschirms einstellen


Halten Sie den Monitor mit beiden Händen am linken und rechten Rand fest und stellen Sie die für Ihren Arbeitsplatz optimal Höhe, Neigung und Drehung ein.

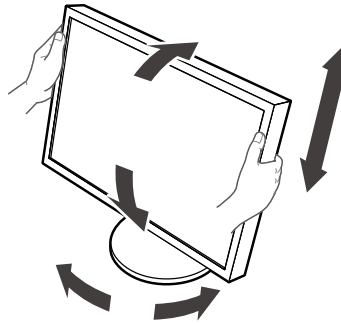


Beachte

- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel richtig angeschlossen sind.
-

Anzeigen der Tastenführung

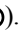Drücken Sie die Tasten an der Vorderseite (außer Taste ) . Die Tastenführung wird über der Taste angezeigt.

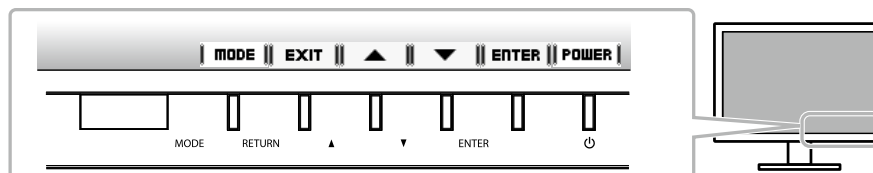

Hinweis

- Die Tastenführung erscheint weiterhin, während das Justiermenü oder das Modusmenü angezeigt wird.
 - Die Tastenführung wird je nach ausgewähltem Menü oder Status unterschiedlich angezeigt.
-


Anzeigemodus auswählen

Diese Funktion ermöglicht die einfache Auswahl eines gewünschten Modus entsprechend der Monitoranwendung.

√: Kalibrierung ist verfügbar.

Modus	Zweck	
1-DICOM	Anzeige im DICOM-Modus möglich.	√
2-Custom	Verfügbar für die Einstellung nach Wunsch.	√
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3	Zeigt den mit der Kalibrierungssoftware justierten Bildparameter an.	√
6-Hybrid-γ	Identifiziert automatisch den Anzeigebereich für Monochrom- und Farbbilder auf demselben Bildschirm und zeigt den jeweils eingestellten Status an.	-
7-sRGB	Geeignet für den Farbabgleich mit Peripheriegeräten, die sRGB unterstützen.	-
8-Text	Einstellung zur Anzeige von Text für Textverarbeitungen oder Tabellenkalkulationen.	-
9-ALT*1	Geeignet zum Anzeigen der Bilder mit der Helligkeit und Wiedergabekennlinie entsprechend der Umgebungsbeleuchtung.	-

*1 Die Bildparameter wird möglicherweise je nach der Verwendungsumgebung nicht richtig angezeigt. Die Qualität des Montirs kann mit diesem Modus nicht verwaltet werden.

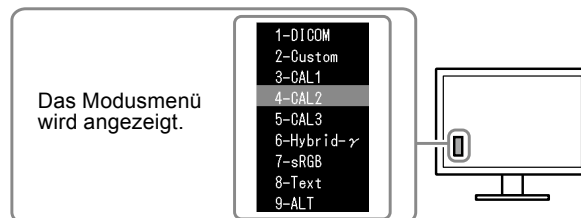

Vorgehensweise

1. Drücken Sie MODE.

Das Modusmenü erscheint in der linken unteren Ecke des Bildschirms.

2. Der Modus wird bei jedem Drücken von MODE in der Liste hervorgehoben.

Sie können den Modus während der Anzeige des Modusmenüs mit ▲ oder ▼ umschalten.

← 1-DICOM ↔ 2-Custom ↔ 3-CAL1 ↔ 4-CAL2 ↔ 5-CAL3 ↔ 6-Hybrid-γ ↔ 7-sRGB ↔ 8-Text ↔ 9-ALT →

Kontrolle der Monitorqualität

Die Qualitätskontroll-Software „RadiCS LE“ (für Windows) gehört zum Lieferumfang dieses Monitors.

Um den Monitor zu kalibrieren und das Kalibrierungsprotokoll zu verwalten, installieren Sie RadiCS LE, wobei Sie die Einzelheiten hierzu im Benutzerhandbuch von RadiCS LE (auf der CD-ROM) finden. Verwenden Sie die Funktion RadiCS SelfQC und den eingebauten integrierten Frontsensor (Integrated Front Sensor), um unabhängig voneinander eine regelmäßige Kalibrierung und eine Grauskalenprüfung durchzuführen. Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM).

Beachte


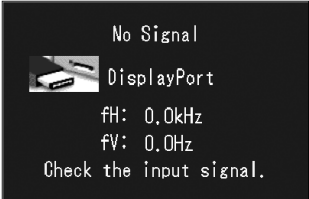
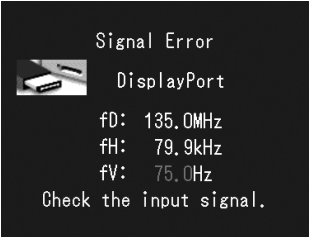
- Bei Verwendung der Software RadiCS LE verbinden Sie den Monitor über ein USB-Kabel mit dem PC.

Hinweis

- Um eine weiterführende Qualitätssicherung auszuführen, die medizinischer Standard entspricht, verwenden Sie das optionale Monitor-Qualitätskontrolle-Softwarekit „RadiCS UX1“.

Kein Bild


Besteht ein Problem auch nach Anwendung aller angegebenen Lösungen, wenden Sie sich an einen lokalen EIZO-Handelsvertreter in Ihrer Nähe.

Problem	Mögliche Ursache und Lösung
<p>1. Kein Bild</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Netzkontroll-LED leuchtet nicht. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Die Netzkontroll-LED leuchtet grün. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Die Netzkontroll-LED leuchtet orange. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Die Netzkontroll-LED blinkt orange und grün. 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen Sie, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Schalten Sie den Hauptnetz-Schalter ein. Drücken Sie . Schalten Sie das Hauptnetz aus und einige Minuten später wieder ein. Erhöhen Sie im Justiermenü die Werte für „Helligkeit“, „Kontrast“ und/oder „Gain-Einstellung“. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie dann wieder ein. Wechseln Sie das Eingangssignal. Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM). Bedienen Sie die Maus oder die Tastatur. Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. Wenn der Anwesenheitssensor auf „Automatik“ oder „Manuell“ gestellt ist, hat der Monitor möglicherweise bereits in den Energiesparmodus gewechselt. Kommen Sie nahe an den Monitor heran. Schalten Sie die Stromversorgung aus, und schalten Sie sie dann wieder ein. Mit dem Gerät, das die DisplayPort-Verbindung verwendet, besteht ein Problem. Beheben Sie das Problem, schalten Sie den Monitor aus und dann wieder ein. Weitere Details finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts, das mit DisplayPort verbunden ist.
<p>2. Die nachstehende Meldung wird eingeblendet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Diese Meldung wird eingeblendet, wenn kein Signal eingespeist wird. Beispiel: <div data-bbox="317 1339 627 1536" data-label="Image">  </div> <ul style="list-style-type: none"> Diese Meldung zeigt an, dass sich das Eingangssignal außerhalb des angegebenen Frequenzbereichs befindet. Beispiel: <div data-bbox="317 1682 627 1917" data-label="Image">  </div> <p>fD: Punktfrequenz fH: Horizontale Abtastfrequenz fV: Vertikale Abtastfrequenz</p>	<p>Diese Meldung wird eingeblendet, wenn das Signal nicht korrekt eingespeist wird, selbst wenn der Monitor ordnungsgemäß funktioniert.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die links stehende Meldung wird eventuell eingeblendet, wenn einige PCs das Signal nicht gleich nach dem Einschalten ausgeben. Prüfen Sie, ob der Computer eingeschaltet ist. Prüfen Sie, ob das Signalkabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wechseln Sie das Eingangssignal. Einzelheiten entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch (auf der CD-ROM). Prüfen Sie, ob der PC so konfiguriert ist, dass er die Anforderungen für die Auflösung und vertikale Abtastfrequenz des Monitors erfüllt (siehe „Kompatible Auflösungen“). Starten Sie den PC neu. Wählen Sie mithilfe des zur Grafikkarte gehörenden Dienstprogramms einen geeigneten Anzeigemodus. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie dem Handbuch der Grafikkarte.

RadiForce® RX440





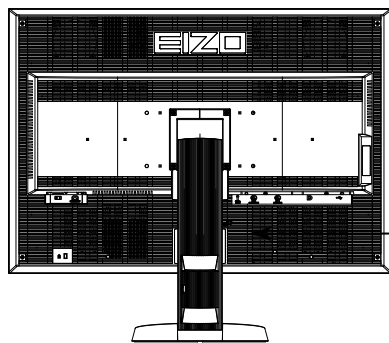



Moniteur couleur LCD

Emplacements des étiquettes de sécurité




WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
WARNING
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.
警告
触电危険、請勿打开后盖。
警告
感電の恐れあり、カバーをあげないでください。
The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification du symbole
	Commutateur d'alimentation principal : Appuyez pour éteindre le moniteur.
	Commutateur d'alimentation principal : Appuyez pour allumer le moniteur.
	Touche d'alimentation : Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.
	Courant alternatif
	Avertissement sur les dangers électriques
	ATTENTION : Reportez-vous à la section SYMBOLES DE SECURITE du chapitre PRECAUTIONS.
	Marquage DEEE : Le produit doit être éliminé séparément ; les matériaux peuvent être recyclés.
	Marquage CE : Marque de conformité aux dispositions des directives de l'Union Européenne 93/42/EEC et 2011/65EU.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, enregistrée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de EIZO Corporation.

EIZO Corporation n'est tenu à aucun engagement de confidentialité sauf en cas d'accord préalable passé avant la réception de ces informations par EIZO Corporation. Malgré tous les efforts déployés pour garantir la mise à jour des informations contenues dans ce manuel, veuillez noter que les caractéristiques techniques du moniteur EIZO sont sujettes à modification sans préavis.


Contenu de l'emballage

Vérifiez que tous les éléments indiqués ci-dessous sont inclus dans le carton d'emballage. Contactez votre représentant local EIZO si l'un des éléments est manquant ou endommagé.

Remarque

- Veuillez conserver le carton et les matériaux d'emballage pour les réutiliser lors d'un déplacement ultérieur du moniteur.


- Moniteur
- Cordon d'alimentation

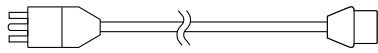

- Câble de signal numérique : DisplayPort - DisplayPort (PP300)
- Câble de signal numérique : DVI-D - DVI-D (Dual Link) (DD300DL)

- Câble USB : UU300
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- Manuel d'installation (ce manuel)
- PRECAUTIONS
- Vis de montage VESA : M4 × 12 : 2 pièces

Commandes et fonctions

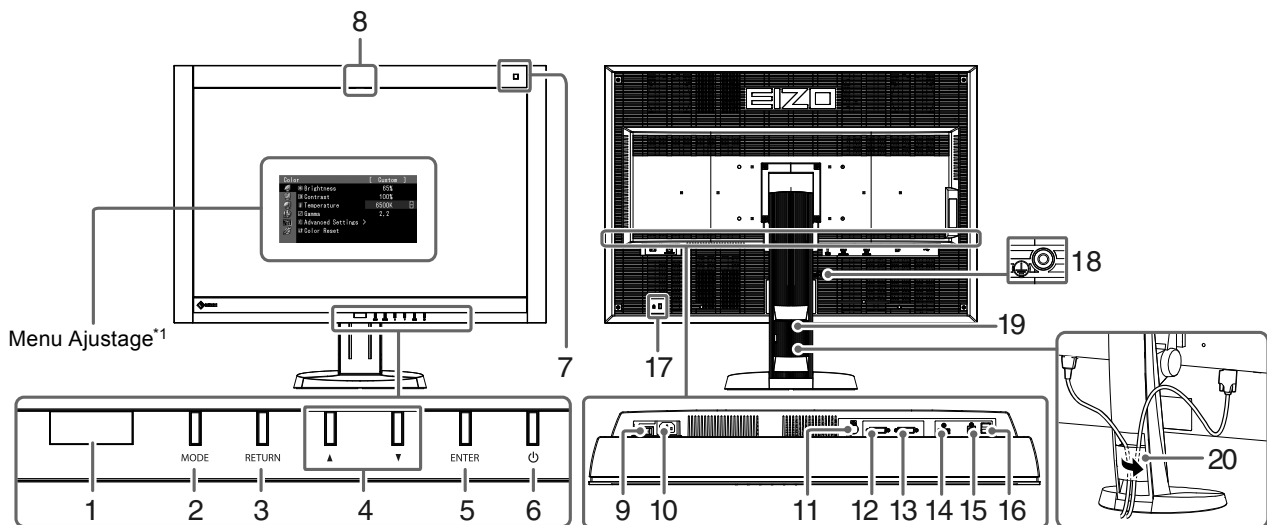

1. Capteur présence	Détecte les mouvements d'une personne se trouvant devant le moniteur.
2. Touche MODE	Pour commuter le Mode de CAL Switch
3. Touche RETURN	Pour annuler le réglage/ajustage et quitter le menu Ajustage.
4. Touche ▲▼	Permet de choisir et d'augmenter/diminuer les réglages des ajustages avancés au moyen du menu Ajustage.
5. Touche ENTER	Pour afficher le menu Ajustage, pour sélectionner un élément de l'écran de menu et sauvegarder les valeurs ajustées.
6. Touche ⏻	<ul style="list-style-type: none"> • Pour mettre sous/hors tension. • Indique l'état de fonctionnement du moniteur. Vert : en marche, Orange : mode d'économie d'énergie, Arrêt : alimentation/arrêt
7. Capteur de lumière ambiante	Pour mesurer l'éclairage de l'environnement.
8. Capteur frontal intégré (Type glissement)	Utilisé pour le calibrage et la Vérif. niv. gris.
9. Commutateur d'alimentation principal	Permet de mettre le moniteur sous/hors tension.
10. Connecteur d'alimentation	Permet de connecter le cordon d'alimentation.
11. Connecteur PS/2	Utilisé pour la maintenance. Ne pas utiliser pour d'autres applications. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du moniteur.
12. Connecteur de signal d'entrée	Connecteur DVI-D (DVI-2 : Single Link)
13. Connecteur de signal d'entrée	Connecteur DVI-D (DVI-1 : Dual Link)
14. Connecteur de signal d'entrée	Connecteur DisplayPort
15. Port USB amont	Permet de brancher un câble USB lors de l'utilisation du logiciel nécessitant une connexion USB ou lors de l'utilisation de la fonction de concentrateur USB.
16. Port USB aval	Permet de brancher un périphérique USB.
17. Fente pour le verrouillage de sécurité	Compatible avec le système de sécurité MicroSaver de Kensington.
18. ⚡ de marque	Borne de terre de protection
19. Pied	Permet d'ajuster la hauteur et l'angle de l'écran du moniteur.
20. Enveloppe de câbles	Protège les câbles du moniteur.

*1 Reportez-vous au Manuel d'utilisation (sur le CD-ROM) pour obtenir des instructions d'utilisation.

Branchement des câbles

Attention

- Vérifiez que le moniteur et le PC sont hors tension.
- Lorsque vous remplacez le moniteur actuel par ce moniteur, veillez à modifier les réglages de votre ordinateur en fonction de la résolution et de la fréquence de balayage vertical propres à ce moniteur. Reportez-vous au tableau des résolutions compatibles (rétro de la page de couverture) avant de brancher l'ordinateur.


Remarque

- Lorsque vous connectez plusieurs PC à ce produit, ou affichez les images à partir de deux signaux en même temps en utilisant un PC, veuillez consulter le Manuel d'utilisation (sur le CD-ROM).
- Lorsque deux signaux s'affichent en même temps en utilisant les fonctions « PinP » ou « PbyP », les signaux d'entrée s'affichent sur les écrans « Principal » et « Sous ».
- Principal : DisplayPort ou DVI-1
- Sous : DVI-2

1. Branchez les câbles de signal aux connecteurs signal d'entrée et au PC.


Vérifiez la forme des connecteurs et branchez les câbles.

Une fois que les câbles de signal sont branchés, serrez les vis des connecteurs pour assurer le couplage.

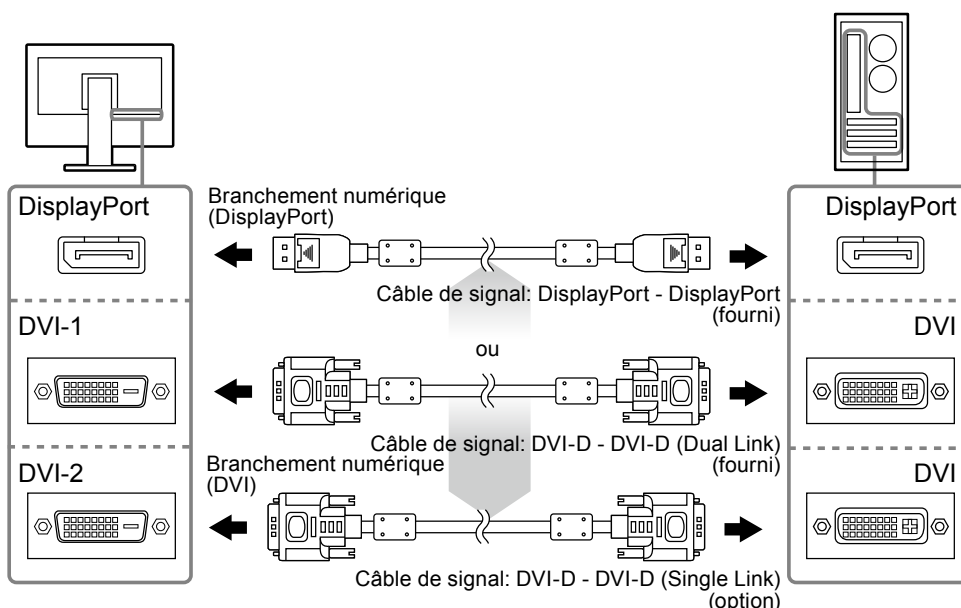

2. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur et dans le connecteur d'alimentation du moniteur.

3. Connectez le câble USB lorsque RadiCS LE ou ScreenManager Pro for Medical est utilisé.

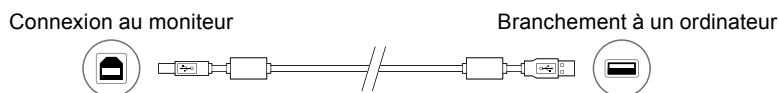

4. Appuyez sur pour mettre le moniteur sous tension.

Le témoin de fonctionnement du moniteur s'éclaire en vert.

5. Mettez le PC sous tension.

L'image affichée à l'écran apparaît.


Si une image n'apparaît pas, reportez-vous à la section « Aucune image » (page 6) pour savoir comment procéder.

Attention

- Mettez le moniteur et le PC hors tension lorsque vous ne les utilisez plus.
 - Pour une économie d'énergie maximale, il est recommandé que le touche d'alimentation soit éteint. L'alimentation du moniteur est coupée lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation ou lorsque vous désactivez le commutateur d'alimentation principal.
-

Ajustage de la hauteur et de l'angle de l'écran


Placez vos mains des deux côtés du moniteur et réglez la hauteur, l'inclinaison et le pivotement de l'écran dans une position agréable et confortable pour travailler.

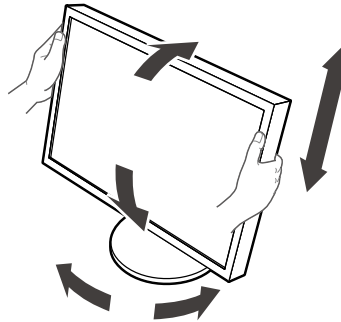


Attention

- Vérifiez que les câbles sont correctement branchés.
-

Affichage du Guide Touches

Appuyez sur les touches situées à l'avant (à l'exception de la touche ). Le Guide Touches apparaît au-dessus de la touche.

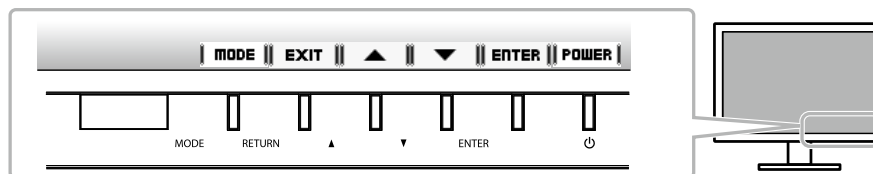

Remarque

- Le Guide Touches s'affichera pendant que le menu Ajustage ou le menu mode est montré.
 - Le Guide Touches s'affiche différemment en fonction du menu ou de l'état sélectionné.
-


Sélection du mode d'écran

Cette fonction facilite la sélection d'un mode personnalisé en fonction de l'application du moniteur.

√ : La calibration est disponible.

Mode	Fonction	
1-DICOM	Disponible pour l'affichage en mode DICOM.	√
2-Custom	Permet de régler le paramètre en fonction de vos préférences personnelles.	√
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3	Affiche l'écran ajusté par le logiciel de calibrage.	√
6-Hybrid-γ	Identifie automatiquement la zone d'affichage pour les images monochromes et en couleurs sur le même écran, et affiche chaque état paramétré.	-
7-sRGB	Adapté à la comparaison des couleurs des périphériques compatibles sRGB.	-
8-Text	Adapté à l'affichage de textes sur traitement de texte ou feuille de calcul.	-
9-ALT*1	Convient à l'affichage des images avec la luminosité et les niveaux de gris appropriés pour l'éclairage ambiant.	-

*1 L'écran peut ne pas s'afficher correctement selon l'environnement d'utilisation. La qualité du moniteur ne peut pas être gérée dans ce mode.

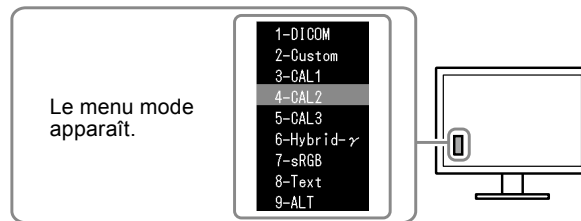

Procédure

1. Appuyez sur MODE.

Le menu mode s'affiche en bas à gauche de l'écran.

2. Les modes de la liste sont mis en surbrillance les uns après les autres chaque fois que vous appuyez sur la touche MODE.

Vous pouvez modifier le mode à l'aide la touche ▲ ou ▼ lorsque le menu mode est affiché.

→ 1-DICOM ← → 2-Custom ← → 3-CAL1 ← → 4-CAL2 ← → 5-CAL3 ← → 6-Hybrid-γ ← → 7-sRGB ← → 8-Text ← → 9-ALT ←

Contrôle de la qualité du moniteur

Le logiciel de contrôle de qualité « RadiCS LE » (pour Windows) est inclus avec ce moniteur.

Pour calibrer le moniteur et gérer l'historique de calibrage, installez RadiCS LE en vous reportant au Manuel d'utilisation de RadiCS LE (sur le CD-ROM). Utilisez la fonction RadiCS SelfQC et le capteur frontal intégré (Integrated Front Sensor) pour effectuer le calibrage périodique et la Vérif. niv. gris pour le moniteur indépendamment. Reportez-vous au Manuel d'utilisation (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails.

Attention

- Branchez le moniteur à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB lorsque RadiCS LE est utilisé.

Remarque

- Pour effectuer un contrôle de qualité avancé conforme aux normes médicales, utilisez le kit logiciel de contrôle de qualité de moniteur en option « RadiCS UX1 ».

Aucune image


Si un problème persiste après application des corrections proposées, veuillez prendre contact avec votre représentant local EIZO.

Problème	Cause possible et solution
<p>1. Aucune image</p> <ul style="list-style-type: none"> Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Le témoin de fonctionnement s'allume en vert. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Le témoin de fonctionnement s'allume en orange. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Le témoin de fonctionnement en orange et vert. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché. Activez le commutateur d'alimentation principal. Appuyez sur . Coupez l'alimentation du moniteur, puis rétablissez-la quelques minutes plus tard. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Augmentez les valeurs de « Luminosité », « Contraste », et/ou « Gain » dans le menu Ajustage. Coupez l'alimentation, puis rétablissez-la. Changez le signal d'entrée Reportez-vous au Manuel d'utilisation (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails. Appuyez sur une touche du clavier ou faites bouger la souris. Vérifiez si l'ordinateur est sous tension. Lorsque la fonction Capteur présence est réglée sur « Auto » ou « Manuel », il se peut que le moniteur soit passé en mode d'économie d'énergie. Approchez-vous du moniteur. Coupez l'alimentation, puis rétablissez-la. Le périphérique qui utilise la connexion DisplayPort a rencontré un problème. Résolvez le problème, éteignez le moniteur, puis allumez-le de nouveau. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide du périphérique raccordé au DisplayPort.
<p>2. Le message ci-dessous s'affiche.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ce message s'affiche si aucun signal n'entre. Exemple : <div data-bbox="316 1211 627 1406" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Le message indique que le signal d'entrée est en dehors de la bande de fréquence spécifiée. Exemple : <div data-bbox="316 1518 627 1756" data-label="Image"> </div> <p>fD : Fréquence de point fH : Fréquence de balayage horizontal fV : Fréquence de balayage vertical</p>	<p>Ce message s'affiche lorsque le signal n'entre pas correctement, même si le moniteur fonctionne correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le message illustré à gauche risque de s'afficher, étant donné que certains ordinateurs n'émettent pas de signal dès leur mise sous tension. Vérifiez si l'ordinateur est sous tension. Vérifiez que le câble de signal est correctement branché. Changez le signal d'entrée Reportez-vous au Manuel d'utilisation (sur le CD-ROM) pour obtenir plus de détails. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'ordinateur est configuré de façon à correspondre aux besoins du moniteur en matière de résolution et de fréquence de balayage vertical (voir « Résolutions compatibles »). Redémarrez l'ordinateur. Sélectionnez un mode d'affichage approprié à l'aide de l'utilitaire de la carte vidéo. Consultez le manuel de la carte vidéo pour plus d'informations.

RadiForce® RX440

彩色液晶显示器

警告声明的位置

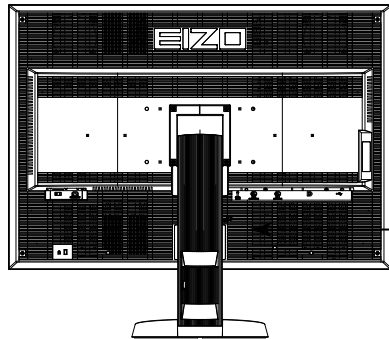










WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.
WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危险，请勿打开后盖。
警告
感電の恐れあり、カバーをあげないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。

设备上的标识

标识	标识指示
	主电源开关： 按此键关闭显示器的主电源。
	主电源开关： 按此键打开显示器的主电源。
	电源按钮： 按此键打开 / 关闭显示器的主电源。
	交流电
	电子报警器
	警告： 请参照预防措施中的安全符号章节。
	WEEE标识： 必须将此产品另行弃置；材料可以回收利用。
	CE标志： 根据欧洲理事会指令93/42/EEC和2011/65EU条款，有权使用EU合格标志。

未经EIZO Corporation事先书面许可，不得以任何形式或以任何方式（电子、机械或其它方式）复制本手册的任何部分、或者将其存放到检索系统中或进行发送。EIZO Corporation没有义务为任何已提交的材料或信息保密，除非已经依照EIZO Corporation书面接收的或口头告知的信息进行了事先商议。尽管本公司已经尽最大努力使本手册提供最新信息，但是请注意，EIZO显示器规格仍会进行变更，恕不另行通知。


打包内容

请检查包装盒中是否包含下列物品。如果缺少物品，或物品存在损坏现象，请与您当地EIZO的代表联系。

注


• 请保留好包装盒和包装材料，以便将来显示器移动或搬运时使用。

- 显示器
- 电源线
- USB电缆: UU300
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- 设定手册 (本手册)
- 预防措施
- VESA安装螺钉: M4 × 12: 2个

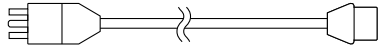

- 数字信号线: DisplayPort - DisplayPort (PP300)
- 数字信号线: DVI-D - DVI-D (Dual Link) (DD300DL)

控制和功能

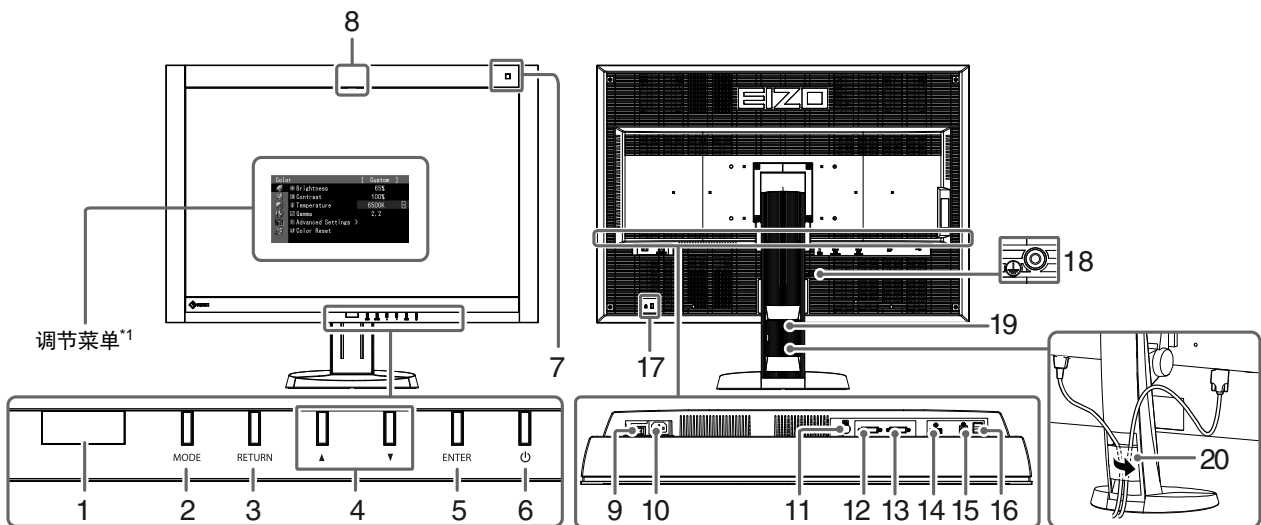

1. 状态传感器	显示器正面的传感器会检测人的移动。
2. MODE 按钮	切换CAL Switch模式。
3. RETURN 按钮	取消设定/调节并退出调节菜单。
4. ▲▼ 按钮	在调节菜单上选择并增大/减小调节设定，进行高级调节。
5. ENTER 按钮	显示调节菜单，确定菜单屏幕上的某个项目，并保存已调节的值。
6. ⏻ 按钮	<ul style="list-style-type: none"> • 开关电源。 • 说明显示器工作状态。 绿: 工作, 橙: 省电模式, 关闭: 主电源/电源关闭
7. 环境光线传感器	测量环境照度。
8. 集成前传感器 (滑动型)	用于校准和灰阶检查。
9. 主电源开关	开关主电源。
10. 电源连接器	连接电源线。
11. PS/2连接器	用于维护。请勿用于其它用途。这样会导致显示器故障。
12. 输入信号连接器	DVI-D连接器 (DVI-2: Single Link)
13. 输入信号连接器	DVI-D连接器 (DVI-1: Dual Link)
14. 输入信号连接器	DisplayPort连接器
15. 上游USB端口	连接USB电缆以使用需要USB连接的软件或使用USB集线器功能。
16. 下游USB端口	连接外部USB设备。
17. 安全锁插槽	符合Kensington防盗锁安全系统。
18. ⚡ 压痕	防护接地端子
19. 底座	用于调节显示器屏幕的高度和角度。
20. 电缆固定器	固定显示器电缆。

*1 关于使用说明，请参照 (CD-ROM上的) 用户手册。

连接电缆

注意

- 确保显示器和个人计算机的电源关闭。
- 将当前的显示器换成该显示器时，请务必将分辨率和垂直扫描频率等PC设置更改为该显示器可用的设置。连接PC之前，请参照兼容的分辨率表格（封页背面）。


注

- 当连接多台个人计算机到本产品，或使用一台个人计算机同时显示来自两个信号的图像时，请参照用户手册（在CD-ROM上）。
- 当使用“PinP”或“PbyP”功能同时显示两个信号时，“主”画面和“子”画面显示以下输入信号。详细说明，请参照（在CD-ROM上）用户手册。
 - 主: DisplayPort或DVI-1
 - 子: DVI-2

1. 将信号线连接至输入信号连接器和PC。


检查连接器的形状，然后连接电缆。

连接到信号线后，请拧紧连接器的螺钉，固定连接。

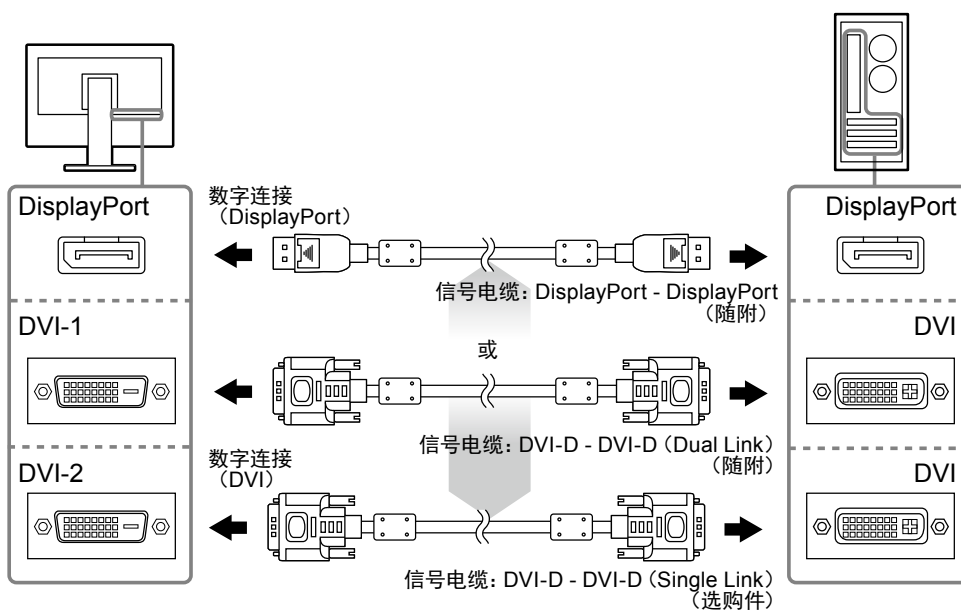

2. 将电源线插头插入电源插座和显示器上的电源连接器。

3. 当使用RadiCS LE或ScreenManager Pro for Medical时，请连接USB电缆。

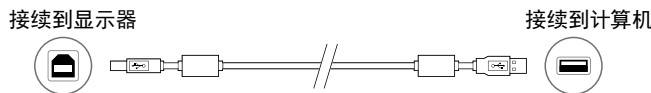

4. 按 打开显示器。

显示器电源指示灯亮起绿色。

5. 将个人计算机开机。

出现画面图像。


如果未出现图像，请参照“不显示图像”（第6页）获得帮助。

注意

- 使用后关闭显示器和个人计算机。
- 为了最大限度地省电，建议您关闭电源按钮。断开主电源开关，或者拔掉电源线，彻底断开显示器电源供应。

调整屏幕高度和角度

用双手抓住显示器的左右两边，调节屏幕高度，将屏幕倾斜并回转到最佳工作状态。

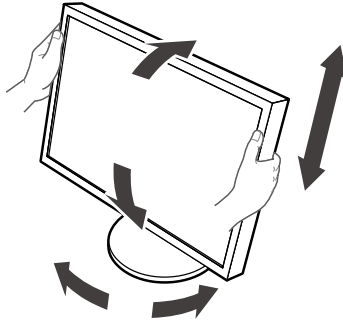


注意

- 请确认各接线是否正确。

显示按钮指南

按前按钮（⏻ 按钮除外），按钮上方出现按钮指南。

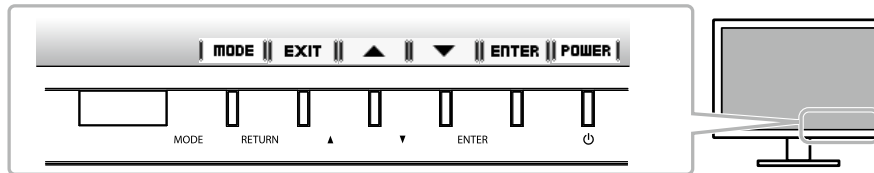

注

- 显示调整菜单和彩色模式菜单时，持续显示按钮指南。
- 按钮指南的显示因所选菜单或状态而异。


选择显示模式

可以根据显示器的用途，用此功能轻松选择一种希望的模式。

√: 校准可用。

模式	用途	
1-DICOM	可在 DICOM 模式中显示。	√
2-Custom	在根据自己的偏爱设定时选择。	√
3-CAL1/4-CAL2/5-CAL3	显示用校准软件调整的屏幕。	√
6-Hybrid-γ	自动识别同一屏幕上显示的黑白和色彩图像的显示区域，并显示相应的设定状态。	-
7-sRGB	适合与兼容sRGB的外部设备进行色彩匹配。	-
8-Text	适合显示文字处理或电子表格中的文本。	-
9-ALT ^{*1}	适合于以适于环境照度的亮度和灰阶显示图像。	-

*1 根据使用环境的不同，屏幕可能不能正确显示。

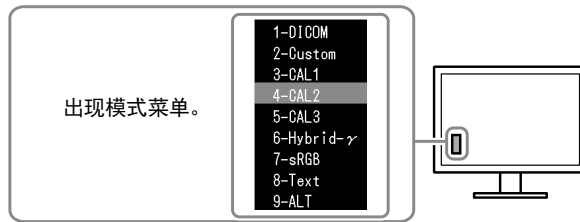

步骤

1. 按 MODE。
屏幕左下角出现模式菜单。
2. 每按一次 MODE，列表的模式将交替高亮显示。
显示模式菜单时，您可用 ▲ 或 ▼ 切换模式。

← 1-DICOM ↔ 2-Custom ↔ 3-CAL1 ↔ 4-CAL2 ↔ 5-CAL3 ↔ 6-Hybrid-γ ↔ 7-sRGB ↔ 8-Text ↔ 9-ALT ↔

控制显示器质量

本显示器附带品质管理软件“RadiCS LE”（用于 Windows）。

要校准显示器和管理校准历史，请参照（在CD-ROM上）RadiCS LE用户手册安装RadiCS LE。通过RadiCS SelfQC功能和集成前传感器（Integrated Front Sensor）分别对显示器定期进行校准和灰阶检查。详细说明，请参照（在CD-ROM上）用户手册。

注意


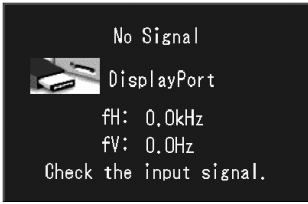
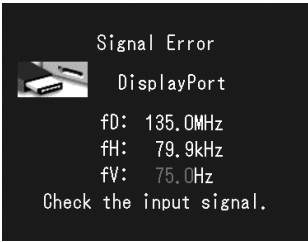
- 使用RadiCS LE 时，请用USB 电缆连接显示器到电脑。

注

- 若要执行符合医学标准的高级质量控制，可使用选购的质量控制软件工具包“RadiCS UX1”。

不显示图像

如果在采取建议的措施后仍旧不能解决问题，请联系当地的EIZO代表。

问题	可能的原因和解决办法
<p>1. 不显示图像</p> <ul style="list-style-type: none"> • 电源指示灯不亮。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 电源指示灯是绿色。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 电源指示灯呈橙色。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 电源指示灯以橙色和绿色闪烁。 	<ul style="list-style-type: none"> • 检查电源线连接是否正确。 • 接通主电源开关。 • 按 。 • 关闭主电源，几分钟后再将其打开。 • 通过调节菜单增大“亮度”、“对比度”和/或“增益” • 关闭主电源，然后再将其打开。 • 切换输入信号。详细说明，请参照（在CD-ROM上）用户手册。 • 操作鼠标或键盘。 • 检查个人计算机的电源是否已打开。 • 当状态传感器被设定为“自动”或“手动”时，显示器可能已经切换到省电模式。靠近显示器。 • 关闭主电源，然后再将其打开。 • 使用DisplayPort连接的设备存在问题。解决此问题，关闭显示器，然后重新打开。有关详情，请参照使用DisplayPort连接的设备的用户手册。
<p>2. 出现下列信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在没有信号输入时，出现此信息。 例如： <div data-bbox="316 884 625 1086" data-label="Image">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • 该信息表示输入信号不在指定频率范围之内。 例如： <div data-bbox="316 1160 625 1400" data-label="Image">  </div> <p>fD: 点时钟 fH: 水平扫描频率 fV: 垂直扫描频率</p>	<p>即使显示器正常工作，如果不正确输入信号，也出现此信息。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可能会出现左边所示的信息，因为某些个人计算机不会在刚开启电源时即输出信号。 • 检查个人计算机的电源是否已打开。 • 检查信号线连接是否正确。 • 切换输入信号。详细说明，请参照（在CD-ROM上）用户手册。 <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • 检查PC配置是否符合显示器的分辨率和垂直扫描频率要求（参阅“兼容的分辨率”）。 • 重新启动PC。 • 用显卡工具选择合适的显示模式。参照显卡手册了解详情。

